

Rafys

LUMBAGO- VOOROVERBUIGRUGKLACHTEN



Rugklachten

Een nieuwe mogelijkheid om rugklachten te onderdrukken is de elastische rugbrace met een extra mogelijkheid om druk uit te oefenen op de pijnlijke rug.

Bij de zogenaamde **“bolle of buk”** rugklachten gebruikt men meestal lederen gordels met een versteviging aan de voorzijde, die vooral het buigen van de rug voorkomt.

Ook zijn er speciale Werk/Sport gordels die alléén een versteviging voor hebben en achter en in de zij in neopreen zijn uitgevoerd, waardoor er veel bewegingsvrijheid is.

**De Rafys Rugproducten zijn verkrijgbaar
via de Blessurotheek, apotheek of bandagist**

RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen



De Rafys Ruggordels Low Back alleen hebben geen functie in het beperken van bewegingen. Ze geven een gevoel van stevigheid en hebben een pijnreducerende werking (mechanische druk en pijn inputonderdrukking). In combinatie met opties, bijvoorbeeld leer voor, kan wel een beperkte flexiebeperking worden bereikt. Verkrijgbaar: S, M, L, XL, XXL en XXXL



1. LOW BACK Brace Man/ Vrouw

De Rafys Low Back Brace is geschikt voor mensen met beginnende of recidiverende rugklachten. Naast een lichte versteviging zorgt de brace ervoor dat de flexie beweging licht afgeremd wordt.

De Low Back Brace Vrouw sluit aan in de taille: anatomische uitvoering met goed draagcomfort.



2. LOW BACK + LEER Man/ Vrouw

Door middel van een demontabel plaatje leer zorgt de brace ervoor dat de flexie beweging goed afgeremd wordt. Het leder kan in een bag geplaatst worden en kan, indien gewenst verwijderd worden.

De Low Back Brace Vrouw + Leer sluit aan in de taille: anatomische uitvoering met goed draagcomfort.



MultiFunctioneel



Ventrale Orthese



Drukpelot


Optioneel:

- Breedte 20 tot 30cm
- MultiFunctioneel: deze bestaat uit 2 banden die d.m.v. klitband met elkaar verbonden worden.
- Lordose drukpelot
- Cold/ Hot pack
- Ventrle orthese verstel of onverstelbaar

3. Rafys LWK NACHTRUSTBRACE

De Rafys LWK Nachtrustbrace is een eenvoudige circulaire brace, die als voordeel heeft dat hij ongeacht de slaaphouding de gewenste ondersteuning blijft geven. De brace is er in 2 diktes: 6 en 8cm
Verkrijgbaar: S, M en L




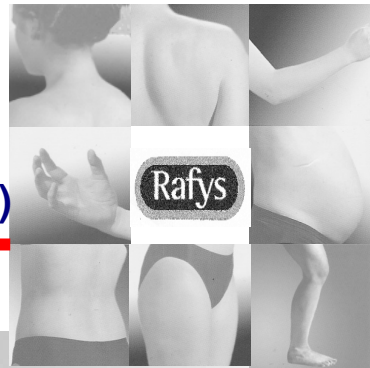

De Rafys ruggordels hebben, naast hun beschermende rol, ook een belangrijke scholende functie: men leert automatisch veilig ruggebruik, immers de flexie wordt belet, men kan niet anders dan bukken en tillen met een correcte rug.

4. Rafys PDA WERK / SPORT

De Rafys PDA Werk/ Sport is alléén breed vooraan. Opzij en achteraan is hij smal en van neopreen. Beperkt alleen flexie. De brace kan goed bij werk- en sporthervattingen worden gebruikt.

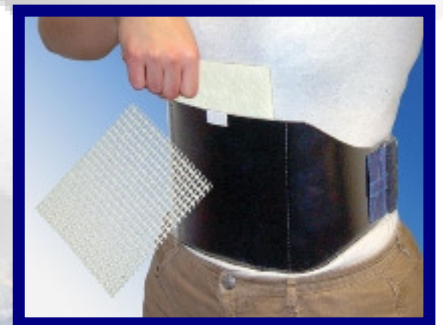

5. Rafys PDA Brace

De Rafys PDA Brace is een eenvoudige rechte lederen gordel bedoeld om de eindstanden van de flexie te vermijden. Beperkt alle beweging.



RUGKLACHTEN BIJ ZITTEN VRIJ VAN DE RUGLEUNING?

Om van deze “vrije” rugklachten verlost te worden is meestal nog moeilijker dan om van de “gesteunde” rugklachten af te komen!

6. Rafys OFFICE BELT

Het meest probate hulpmiddel is de Office Belt, een handige verbindingsband tussen rug en knieën die doorzakken voorkomt.



De Office Belt is er in verschillende uitvoeringen: om één knie, om twee knieën, met een snelsluiting en multifunctioneel (kan snel omgetoverd worden in een werk/ sport brace). Met de Office Belt traint men ook actief veilig ruggebruik. Verder kunnen wigkussens in verschillende steilheden hier vaak dienst doen.





7. Rafys HANGHULP

De Rafys Hanghulp is een perfect middel bij rugklachten. De patiënt kan zelf de tractie aan de wervelkolom uitvoeren, op een geheel veilige wijze. De hanghulp is klein en opvouwbaar, zodat hij overal mee naar toe genomen kan worden.



8. Rafys OVERDEURREKSTOK

Is klein en compact met dubbele, comfortabele handgreep die over de deur wordt opgehangen. Het is tevens een eenvoudige oplossing voor het oefenen in hangfunctie.



9. DEURREKSTOK

De Deurrekstock is een stevige metalen rekstok en wordt op de gewenste hoogte in elke deurlijst bevestigd. De Deurrekstock kan alleen en in combinatie met een gordel en auto tractieband gebruikt worden. In combinatie met een gordel en auto tractieband worden de schouders en handen veel meer ontlast en kan de tractie langdurig worden volgehouden.

Verkrijgbaar bij:

Meer info
 Vraag raad in de
 BlessuroTheek
 of contacteer **Rafys België**
 E info@ergomedics.be
 T 03 257 03 58
 F 03 238 80 09