

Rafys

TENNISELLEBOOG



Nieuw



Tenniselleboog?

Daar wilt u snel van af?

Bij de BlessuroTheek hebben we verschillende tenniselleboogbandjes. Den ene tenniselleboog is immers de andere niet.

1. Verschillende drukelementen om de pijn te onderdrukken.
2. Speciaal op de onderarm gevormde tenniselleboogbandje.
3. "Topsport" versies die ingezet kunnen worden bij veelvuldig en professioneel gebruik in de sport.

**De Rafys Producten zijn verkrijgbaar
via Blessurotheek, apotheek of bandagist**

RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen


T. 03 248 04 57

F. 03 238 80 09

E. info@ergomedics.be



Als heffen van een kopje “troost” je meer pijn dan troost geeft, en het uitwringen van een vaatdoek niet meer kan zonder pijn aan de buitenzijde van de elleboog, dan heb je waarschijnlijk een tenniselleboog.

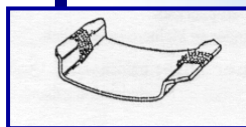

1. TENNIS elleboogbandje (AEB)

AEB: Anti Epicondylitis Bandje

AAEB: Anatomisch Anti Epicondylitis Bandje

Het Rafys AAEB is beter aan de vorm van de onderarm aangepast en combineert druk op de spierbuik van de extensor carpi radialis brevis met een verminderde circulaire belasting. Het drukelement zich aan de buitenzijde van de arm.

Bij GOLFELLEBOOG: drukelement aan de binnenzijde van de arm plaatsen.

2. TENNIS elleboogbandje (AEB) TOPSPORT

Het Tenniselleboogbandje Topsport is voorzien van een klein elastisch tussenstukje en wordt standaard geleverd met een *hard* en een *zacht* drukelement.

Dit zorgt voor een optimale verbinding met de arm en een uitstekend draagcomfort bij sporten zoals: tennis, badminton en squash.

3. Tenniselleboog Brace ADL

De Rafys Tenniselleboog Brace ADL bestaat uit een neopreen kous en een AAEB. De onderdelen zijn demontabel en afzonderlijk te gebruiken en kunnen aangewend worden in de verschillende stadia van epicondylitis.

Bij musculaire onderarmklachten kan een combinatie van AEB en kous nuttig zijn. Ook extra warmte, zelfmassage en rekking van de onderarmmusculatuur kunnen hier overigens nuttige aanvullingen zijn.

Maatvoering: S, M en L + vermelding Links of Rechts



Beperking van de kracht, beperking van het strekken van de elleboog en bij zware tenniselleboog tijdelijke beperking van zowel hand- als elleboog functie.



4. ELLEBOOG Brace ADL

Bestaat uit een elleboogkous van neopreen waarop 2 ankers zijn bevestigd, al dan niet demontabel. Elk anker heeft aan weerszijden 2 ringen. De kruisbanden verbinden de proximale- en distale ringen. Met de kruisbanden kan de mate van extensiebeperking worden ingesteld. De demontabele ankers hebben als voordeel dat zij verwijderd kunnen worden en meer en minder uit elkaar worden geplaatst.

Maatvoering: S, M en L



5. TENNISELLEBOOG ORTHESE

De Rafys Elleboog Brace met aluminium achterspalk is de Tenniselleboog Orthese. Deze verdeelt de afremkracht nog beter over de onder- en bovenarm en heeft beter draagcomfort. De spalk is demontabel. Uitvoering in neopreen.

Maatvoering: S, M en L



6. TENNISELLEBOOG HANDSPALK

Deze spalk wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij de vingers niets meer mogen vastpakken, b.v. bij een epicondylitis, als de klachten er hevig of hardnekkig zijn. De vingers kunnen met een handspalk niets vastpakken. Soms is een **kapje** over de vingers nodig om te voorkomen dat de patiënt iets tussen de spalk en vingers pakt en toch de epicondyl belast. Het is van belang dat de patiënt bij het dragen van een handspalk een oefenschema en draaginstructies krijgt, hij af en toe uit de handspalk gaat en lichte mobiliserende oefeningen uitvoert. De spalk moet ook lerend gebruikt worden, leren om b.v. de andere hand te gebruiken of zaken anders uit te voeren. Maatvoering: S/M en M/L + vermelding Links of Rechts



7. TENNISSELLEBOOG X-LITE

X-Lite is een thermoplastisch open netwerk:

- uitstekend zelfklevend vermogen
- snel vervormbaar na water- of föhn verwarming
- correctie en fijne afwerking ook na uitharding mogelijk
- drukpunten kunnen ook naderhand verwijderd worden
- hoog ventilatie vermogen
- onbeperkt houdbaar

Met de Rafys Tenniselleboog X-Lite kan de extensie ook goed afgeremd worden, zowel bij het epicondylitis frictie syndroom als bij overstrekingsletsels. Wordt met een (A)AEB aan de arm gefixeerd. Het (A)AEB kan bijvoorbeeld in een later stadium ook apart worden gebruikt. De tenniselleboog X-Lite wordt door een (para)medicus worden gemaakt.

8. COLD/ HOT PACK en MOOR KOMPRESSEN

De **Cold/ Hot Pack** bevat een gel, die zelfs bij -15°C nog flexibel blijft. Het kalmeert de zenuwuiteinden op de plaats van de verwonding en vermindert de zwelling.

Maatvoering: 10 x 10cm / 10 x 26,5cm / 30 x 20cm

Moor Kompressen zijn gevuld met natuurlijke thermogeleidende 'Heilmoor'

De pakking is bij hoge temperatuur kneedbaar en kan gedesinfecteerd worden.

Maatvoering: 22 x 40cm / 30 x 40cm



Verkrijgbaar bij:

Meer info
 Vraag raad in de
 BlessuroTheek
 of contacteer **Rafys België**
 E info@ergomedics.be
 T 03 257 03 58
 F 03 238 80 09